

titan®

Подтяжка кожи без скальпеля

Titan — новая технология теплового воздействия на глубокие слои кожи

Процедура Titan:

- Уникальная технология с возможностью индивидуального дозирования инфракрасного излучения
- Подходит для всех типов кожи, в том числе и для загорелой кожи
- Безопасная, комфортная процедура с лифтинговым эффектом, не требующая реабилитационного периода
- Постоянное охлаждение эпидермиса во время процедуры



CUTERA®

Технические характеристики

Платформа XEO

Параметры электропитания:

230 В, 20 А

Габариты основного блока:

30,5x48,3x88,9 см

Вес: 50 кг

Titan

Длина волны: 1100-1800 нм

Плотность энергии: 5-70 Дж/см²



Размер пятна: 10x15 мм

Непрерывное охлаждение эпидермиса


Индикация: звуковая и LED-индикатор

Время воздействия: от 4 до 11 секунд

Индивидуально дозированный инфракрасный свет создает уникальный термический нагрев

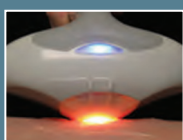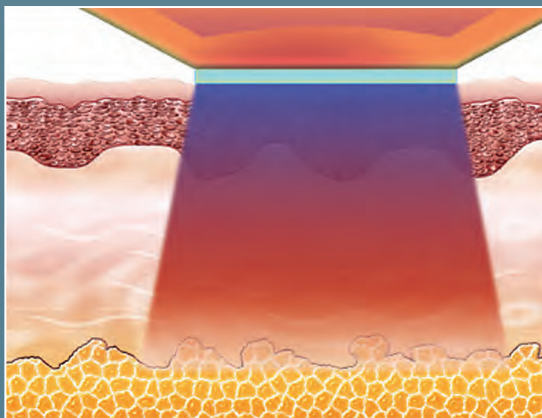

Инфракрасный свет обеспечивает непрерывный нагрев в глубоких слоях кожи

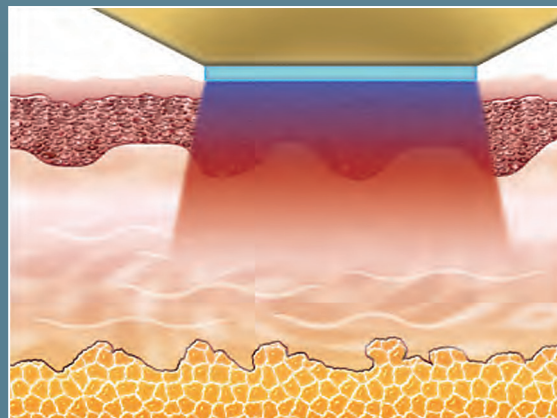

Тепло распространяется от зоны воздействия насадки на подлежащие ткани, при этом постоянное охлаждение обеспечивает защиту эпидермиса от избыточного теплового воздействия